

# Silla de ruedas motorizada

plegable

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020274

## Especificaciones




### FS111-AF1

Diseñada para proporcionar una movilidad independiente y cómoda a los usuarios. Está fabricada en acero resistente que garantiza durabilidad para un uso prolongado. Gracias a sus ruedas traseras neumáticas de 16 pulgadas y delanteras macizas de 8 pulgadas brindando un desplazamiento suave y estable tanto en interiores como en exteriores. Cuenta con un joystick que permite manejar la silla con precisión y sin esfuerzo. Sus cajones de baterías, en la parte inferior de los apoyabrazos, permite plegarla sin necesidad de retirar la batería, lo que facilita el almacenamiento de la misma.


*Este producto se encuentra sujeto a inventario.*


### + Incluye


 Joystick


 Cinturón de seguridad


## Otras especificaciones

 Velocidad 1 a 6km/hr

 Potencia del motor 250Wx2


 Inclinación máxima 12°

 Capacidad de la batería 24Ah

 Autonomía: max 20km/8h

\*Dependiendo del peso, velocidad, terreno e inclinación.

## Imagen del producto

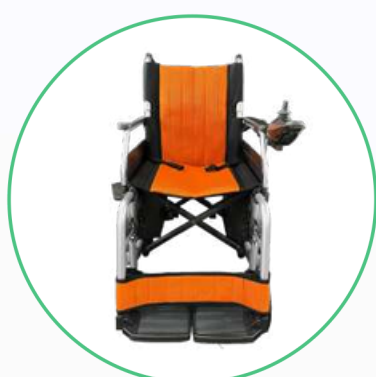



## Medidas

Capacidad de peso

 **100kg**

Peso del producto con baterías

 **47.5kg**

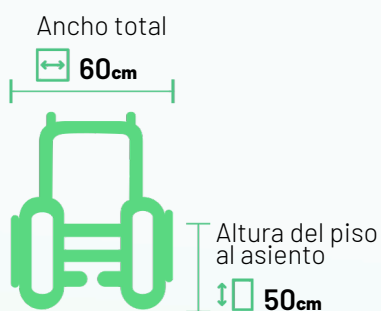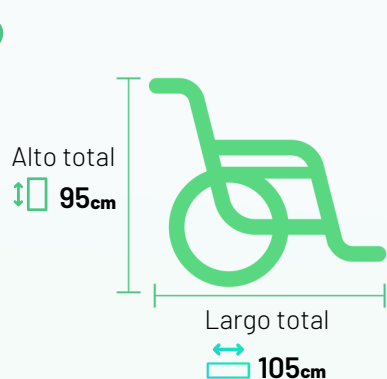

## Medidas del asiento

Profundidad  
↑ **40cm**

Ancho  
↔ **47cm**

Altura espalda  
↑ **45cm**

## Recomendaciones

- Verificar que los neumáticos se encuentren bien inflados.
- Subir y bajar de la silla mientras está apagada.
- No levantar la silla por los brazos. Al ser removibles, podrían dañarse.
- Ajustar los apoyapiés a una altura adecuada para la comodidad del usuario.
- Revisar que los frenos estén funcionando correctamente antes de cada uso.
- Accionar los frenos antes de sentar al paciente y siempre que la silla de ruedas esté bloqueada para evitar movimientos involuntarios.
- Evitar terrenos irregulares y superficies resbaladizas que puedan comprometer la estabilidad de la silla de ruedas.
- Almacenar la silla de ruedas en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.

- No exceder la capacidad máxima de carga de la silla, ni sobrecargue la silla de ruedas con objetos adicionales, ya que puede afectar la seguridad del usuario.
- No permita que la batería se descargue por completo, esto afectará su vida útil.
- Tenga siempre presente realizar las cargas de la batería al 100%, las cargas parciales afectarán su rendimiento óptimo.

#### Garantía

Este producto está cubierto con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería, más 6 meses en controlador y baterías, no cubre descargas.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

[www.multifarmaceutica.com](http://www.multifarmaceutica.com)

