

Silla de ruedas estándar

en aluminio con pin de desmonte rápido

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020274

Especificaciones



Estructura en aluminio.



Cojinería en nylon.

Imagen ilustrativa



Apoyabrazos ajustables en altura y abatibles.

FS959L

Combina un diseño innovador con materiales de alta calidad para brindar una experiencia de uso excepcional. Su estructura en aluminio, ligera y resistente, junto con las llantas neumáticas de 24 pulgadas con sistema de desmontaje fácil, la convierten en una opción duradera y confiable. Ideal para usuarios que buscan una silla práctica y versátil.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.



Apoyapies removibles.

+ Incluye



Pin de desmonte



Ruedas antivuelco



Rueda trasera neumática, rin radio con pin de desmonte rápido 24".





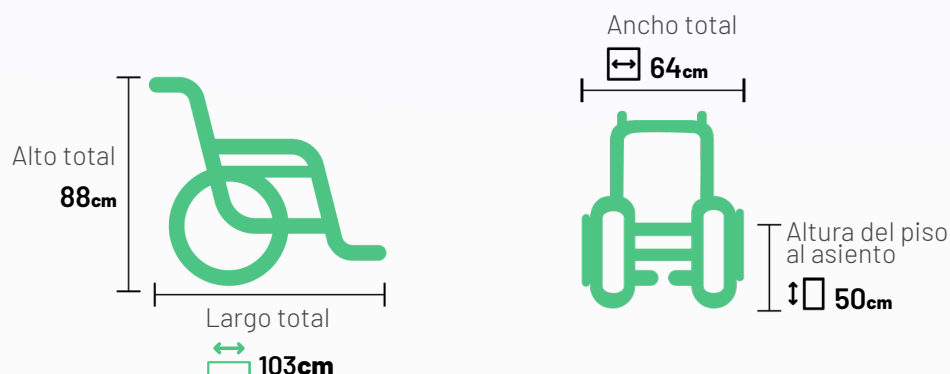
Rueda delantera maciza 6".



Imagen del producto



Medidas

Capacidad de peso  **100kg** Peso del producto  **15.6kg**



Medidas del asiento	
	Profundidad 40cm
	Ancho 46cm
	Altura espaldar 38cm

Recomendaciones

- Verificar que los neumáticos se encuentren bien inflados.
- Ajustar los apoyapiés a una altura adecuada para la comodidad del usuario.
- Revisar que los frenos estén funcionando correctamente antes de cada uso.
- Accionar los frenos antes de sentar al paciente y siempre que la silla de ruedas esté bloqueada para evitar movimientos involuntarios.
- Evitar terrenos irregulares y superficies resbaladizas que puedan comprometer la estabilidad de la silla de ruedas.
- Almacenar la silla de ruedas en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.
- No exceder la capacidad máxima de carga de la silla, ni sobrecargar la silla de ruedas con objetos adicionales, ya que puede afectar la seguridad del usuario.
- No levantar la silla por los brazos. Al ser removibles, podrían dañarse.

Garantía

Este producto está cubierto con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.