

Silla de ruedas neurológica

para adulto plegable

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020274

Especificaciones



Asiento y espaldar removibles.



Estructura en aluminio.

Controladores laterales de tronco.



Apoyabrazos removibles y ajustables en altura.



Rueda trasera en poliuretano, rin estrella 16".

Rueda delantera maciza 6".

FS958LBCGPY

Fabricada en aluminio de alta calidad, ofrece la combinación perfecta entre resistencia y ligereza.

Tiene apoyabrazos y apoyapies que son removibles y graduables para una postura más personalizada.

Cuenta con un sistema de reclinación y de basculación que en conjunto con sus múltiples ajustes permiten adaptarla a las necesidades cambiantes de cada persona.

Al ser plegable la hace muy fácil de guardar y transportar.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

Soporte para pantorilla graduable y elevable.



Apoyapies graduables y elevables.

Especificaciones

Ruedas antivuelco

Mesa de trabajo

Sistema reclinable

Arnés de seguridad

Soporte pélvico

Sistema de basculación

Abductor de cadera

Soporte céfalico

Imagen del producto




Medidas

Capacidad de peso

100kg

Peso del producto

13.8kg

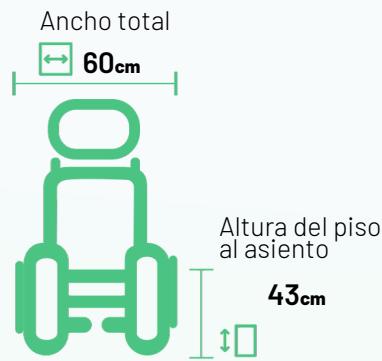

Medidas del asiento
Profundidad 41cm
Ancho 46cm
Altura espaldar 54cm

Recomendaciones

- Ajustar los apoyapies a una altura adecuada para la comodidad del usuario.
- Revisar que los frenos estén funcionando correctamente antes de cada uso.
- Accionar los frenos antes de sentar al paciente y siempre que la silla de ruedas esté bloqueada para evitar movimientos involuntarios.
- Evitar terrenos irregulares y superficies resbaladizas que puedan comprometer la estabilidad de la silla de ruedas.
- Almacenar la silla de ruedas en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.
- No exceder la capacidad máxima de carga de la silla, ni sobrecargue la silla de ruedas con objetos adicionales, ya que puede afectar la seguridad del usuario.

Garantía

Este producto está cubierto con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

www.multifarmaceutica.com 